

美迪森

安瓿瓶开瓶器

简单安全的开启玻璃安瓿



应该用在任何玻璃安瓿的地方

轻松保护您远离安瓿的伤害



简单安全

SIMPLE AND SECURE



远离划伤

AWAY FROM SCRATCHES



提高效率

IMPROVE EFFICIENCY



专利产品

PATENTED PRODUCT

应该用在任何玻璃安瓿的地方

轻松保护您远离安瓿的伤害



医学行业




美容行业




护理人员



个人使用

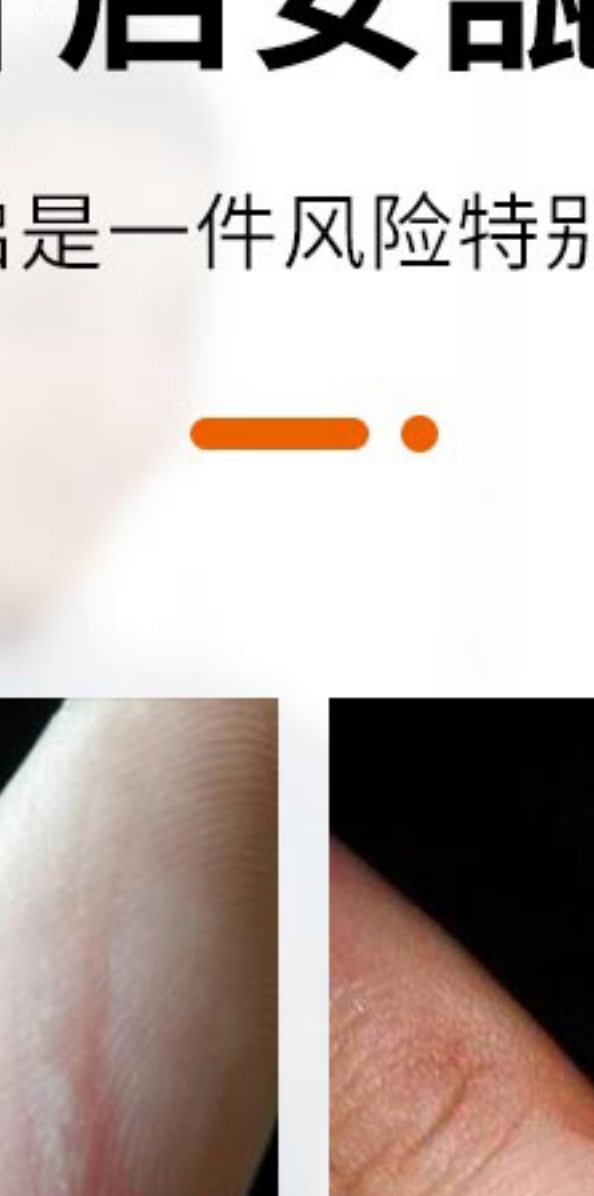

化学实验

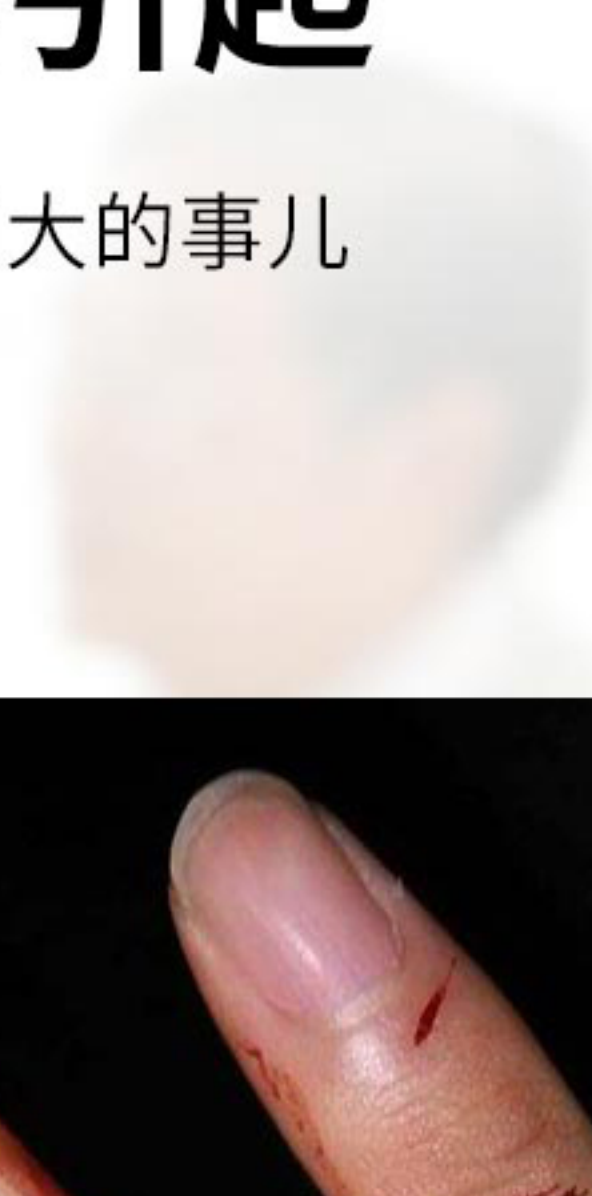

兽医业

26%的锐器伤因开启安瓿引起

安瓿开启是一件风险特别大的事儿



三个护士中会有一个开启玻璃安瓿受伤经历

避开安瓿锐器伤 提供职业安全健康

大部分接触到安瓿的人都遭受过锐器伤




营造一个安全的工作环境

超过50%的安瓿使用者有受伤的经历



产品信息

请选择正确的美迪森开瓶器

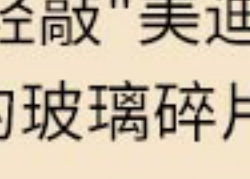

有4种类型任您选择 可用于1ML到25ML安瓿



20-25ML



10ML



5ML



1-2ML

使用方法

使手远离安瓿尖锐的边缘



1. 将安瓿颈部标记点对齐开瓶上的标记点插入到开瓶器中



2. 安瓿颈部插入开瓶器至图所示标记线出主要使瓶颈标记处

定期清理

移动O型圈如图所示拆开部分用水清洗

备注

如果安瓿盖子破损,轻敲"美迪森开瓶器"在一个锐器盒上部来移除剩余的玻璃碎片,然后在流动的水下冲洗。

尺寸

如果安瓿的盖子太大,可能会进不去入口,这时需要更换一个大的开瓶器。如果安瓿太小,"美迪森开瓶器"不能牢固的固定住顶部,就换一个小的。

产品展示

提供好的实践职业健康安全

