

# 医用真空负压机

Negative pressure drainage device

Med VAC



专利号: 实用 ZL 2011 3 0150021.9  
外观 ZL 201430202321.0  
发明 201510379238.4

# 产品 构成

产品主要由主机、电源线、液体收集瓶组成。主机主要由真空泵、控制电路、压力传感器、CPU、控制面板及显示器、机箱和内置锂电池组成。



## 产品特点

### 超长使用寿命

性能稳定、寿命长,可连续运转10000小时以上。

### 人性化操作

微电脑电子芯片控制,精确度高,操作人性化。

### 液晶显示屏

液晶数字化显示,方便使用者调整和操作。

### 可调节负压值

超低负压设计 (-50mmHg至-450mmHg),连续可调。



## 产品特点



### 多种操作模式

超级智能设计,多种操作模式设定,实用性更强。

### 独特消声系统

精心设计的消声系统将本机的运行噪音控制在极低的范围(小于45分贝),不影响患者休息。

### 智能记忆

智能记忆系统,能够自动记录上次设定的参数及模式,无需每次开机反复设置。

## ■ ■ 多种安全电源解决方案



## ■ 安全保护



本机内有防溢流保护报警装置, 在污液到达警戒线时会自动停止工作并报警, 防止污液进入主机, 避免二次污染, 并防止损毁机器。



具有漏气自动报警功能, 机器运转10分钟内负压值无变化, 则自动停止并报警。




多重安全保护: 漏气报警、过热自动散热保护、防溢流保护等。




高负压调整范围适合全国各地区(各种海拔的地区)使用。

## 产品性能

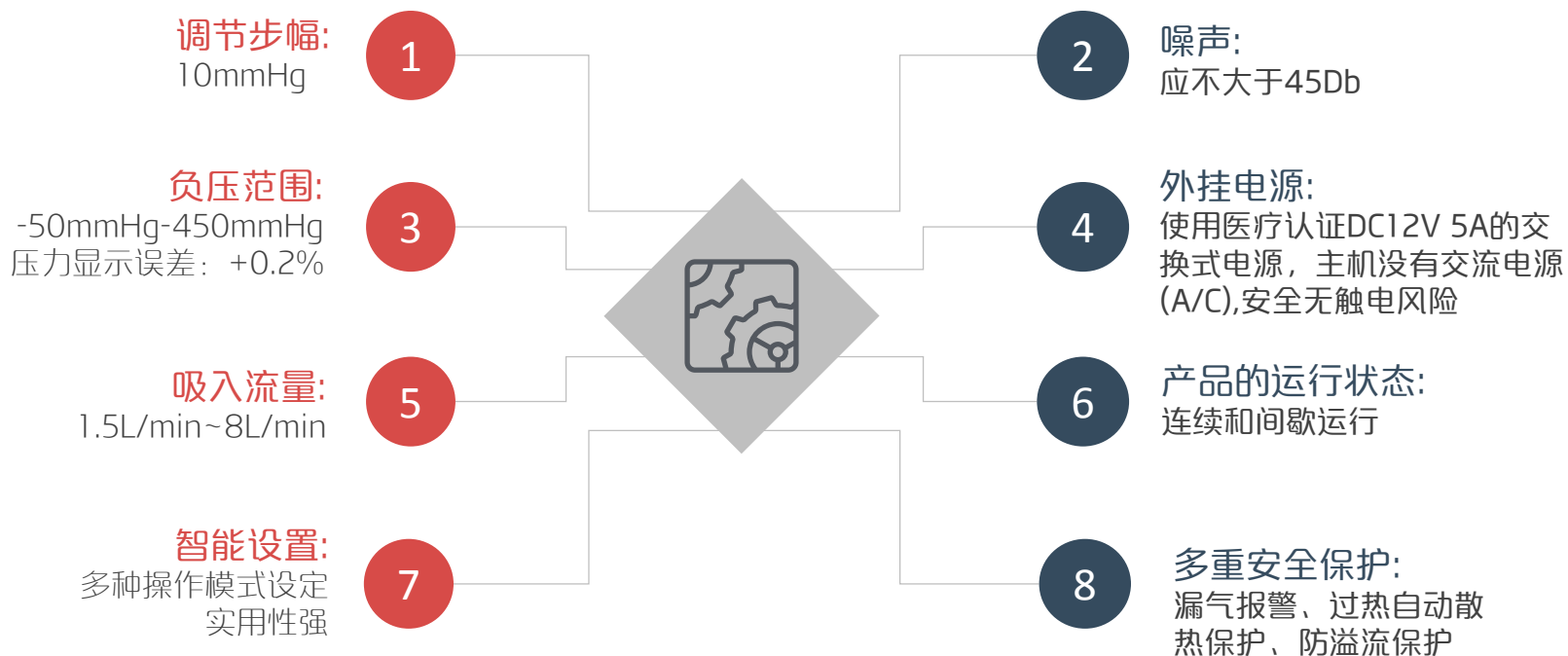

## 适用范围

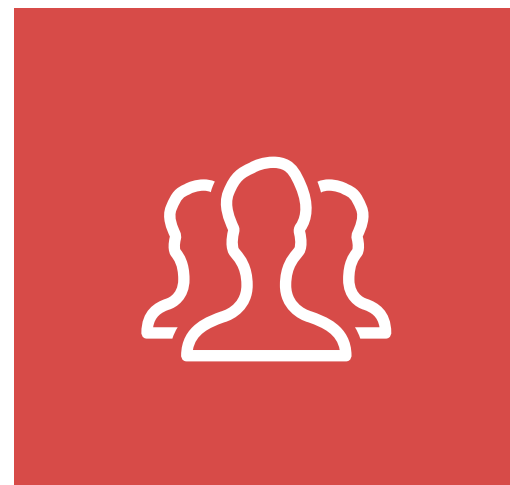

### 适用范围

适用于急性创面、慢性难愈合创面及外科手术后渗出液较多的创面引流。



### 禁忌症


未清创、有坏死焦痂的创面；创缘有肿瘤组织的部位；与器官相通的窦道；有大血管或器官外露的创面。

## 产品优势




### 轻量化设计

重量轻，智能操作显示界面，充电后可持续使用4-6小时，便于各个科室间移动使用。

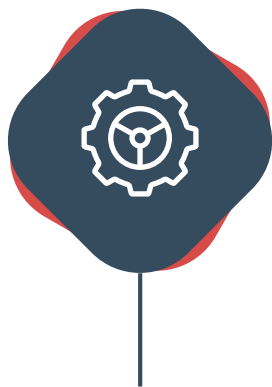

### 稳定可调节

根据患者的实际需求，负压值可在0 ~ 450mmHg 之间进行选择使用。完全弥补了，中心负压不稳定及不能调节的问题。

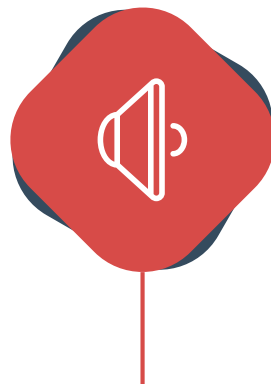

### 超低噪音

噪音超低，是目前同类产品中，噪音解决方案中，最佳的产品。



### 间歇负压

间歇负压，刺激毛细血管，促进毛细血管的快速生长，愈合周期至少缩减1.5倍。





威海美迪森医疗器械股份有限公司

Weihai Medison Medical Equipment Co.,Ltd

电话Tel: +86-631-5337707

传真Fax: +86-631-5337706

服务电话: 400-8117-709

E-mail: imedison06@imedison.com

地址Add: 山东省威海市环翠区羊亭镇曲家河工业园

Qujiahe Industrial Park, Yangting Town, Huancui District,  
Weihai City, Shandong Province, China